

Zimmer
MedizinSysteme



Soleoline
Galva

Zimmer




Soleo Galva

Soleo*line*, la Facilité

Soleo*line*



Programmes

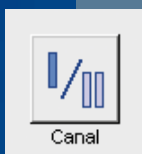

Canal

Soleo*line* a été conçu pour satisfaire toutes vos exigences :


Rapidité : Accès direct par des menus simples et innovants.

Simplicité : Un grand écran tactile au design professionnel.

Sécurité : Tous les paramètres de traitement visibles en un clin d'œil.

Grâce à son logiciel intuitif, Soleo*line* offre un réel plaisir d'utilisation au praticien. Son élégance et sa convivialité sont les atouts de son succès.

Soleo *Galva*, l'électrostimulation multi-canaux moderne

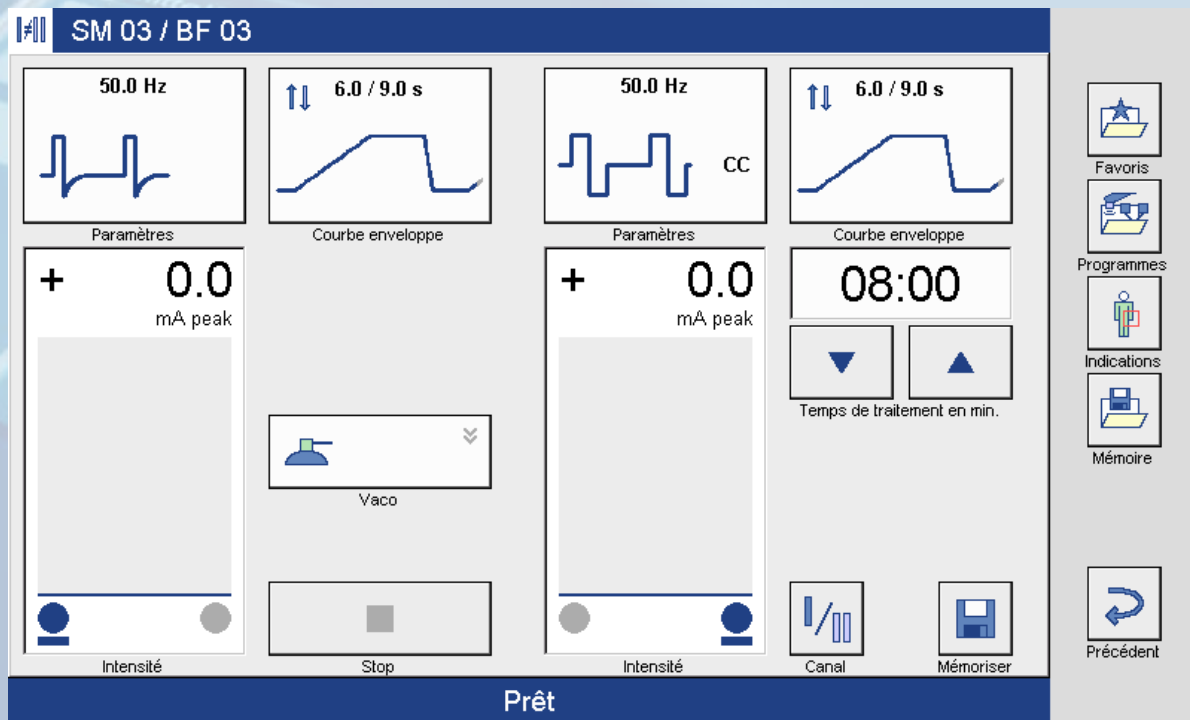

Soleo *Galva*



Programmes spécifiques

Toutes les formes de courants, dont BF, MF, MF/BF, IF sont accessibles sous forme de programmes pour la thérapie antalgique, excito-motrice et de stimulation du métabolisme. Un classement ingénieux facilite leur sélection.



Menu "Canal"

Une simple touche donne accès à tout type de stimulation
 - à 1 ou 2 canaux
 - synchronisée
 - alternée
 - séparée
 La stimulation multi-canaux rapide et simple : une idée Zimmer



Thérapie individualisée

A chaque patient sa thérapie!
 Grâce aux fenêtres actives, il est désormais possible en quelques secondes de modifier et d'adapter les paramètres!
 ... pour éventuellement les mémoriser sur la carte SD!



Caractéristiques techniques

Version Electrostimulation

Canaux
Electrostimulation
Types de courants
Programmes
Modules spécifiques
Paramétrage
Guide d'applications

Galva

2 canaux indépendants (programmes, intensités, paramètres)
Synchronisée, Alternée, Séparée, Séquentielle
Galv., BF, biphasiques, MF, MF/BF, Interférentiels
Plus de 100 programmes spécifiques
Rééducation musculaire / Rééducation du sportif
Tous les paramètres modifiables sont accessibles sur écran tactile
Plus de 120 indications thérapeutiques

Soleo*line*

Carte SD
Support d'accessoires
Dimensions

Pour toutes les versions

Carte SD 1 GB / 120 Places mémoires + 120 Places Favoris
2 supports livrés avec toutes les versions
Largeur 33 cm / Hauteur 13 cm / Profondeur 22cm / Poids 2 kg

Appareil Vacuum

Modes d'utilisation
Canaux
Vide d'application
Utilisation
Pilotage
Dimensions

VacoS pour version Galva ou SonoStim

Continu et pulsé de 1 à 8 secondes
2 indépendants
Réglable de 1 à 60 kPa
Simplifiée par un vide d'application pré-programmé à 16 kPa
Sur écran du Galva ou SonoStim
Largeur 33 cm / Hauteur 13 cm / Profondeur 22cm / Poids 3 kg

Options / Accessoires

Guéridon Move
Electrodes
Télécommande

1 tiroir avec plateau en verre + 2ème étagère en verre
Electrodes auto-collantes Zimmer
Sans fil; à 2 canaux, Intensité et Start / Stop

Zimmer Elektromedizin France
24 avenue Joannès Masset
69009 Lyon
Tel: +33 4 78 83 55 36
Fax: +33 4 78 64 60 43
zimmer.cryo@wanadoo.fr
www.zimmermed.fr